



## english


# Pre-Seed®

## Vaginal lubricant when trying to conceive

- Gives an optimal sperm environment
- Doesn't harm sperm or embryos
- Clinically tested and Doctor recommended
- pH balanced to Match Fertile Cervical Mucus

### Directions for Using Pre-Seed® with Disposable Applicators:

1. Remove seal from tube before initial use.
2. Pre-Seed® can be applied up to 15 minutes prior to intercourse. Applying it before you begin making love allows the moisture to disperse throughout the vagina and allows more spontaneity for you as a couple.
3. Attach the applicator to the Pre-Seed® tube by twisting the end of the applicator firmly onto tube (see picture).

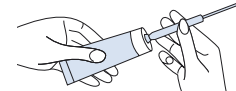

4. Gently squeeze the Pre-Seed® into the applicator, and continue squeezing until the applicator is full or the desired amount is present in the applicator. Most women will choose the 3 gm fill line to meet their product needs. Separate the applicator from the tube. Be sure and keep the open end of the applicator upright so product is not lost. After each use, replace the cap and roll up the tube from the bottom. Do not leave Pre-Seed® uncapped between uses.

5. Do not store Pre-Seed® in the applicator for more than 30 minutes prior to use. This means

if you draw Pre-Seed® into the applicator but do not insert it intravaginally within 30 minutes, the unused Pre-Seed® needs to be discarded and the applicator disposed of.

6. To apply Pre-Seed®, gently insert the applicator deep into the vagina. This can be done while standing, lying down or sitting (such as on the toilet).
7. Holding the barrel of the applicator, slowly push the plunger all the way in to release the lubricant into the vagina (see picture).



8. Remove both parts of the applicator from the vagina.
9. In order to get the right amount of moisture for your body\*, bear down slightly after depositing the product. This will expel any excess Pre-Seed® that your body doesn't need. If desired, use a tissue to lightly wipe off any extra product that is on the vulva.
10. Discard applicator following use. DO NOT REUSE APPLICATORS.

\* If this application method doesn't provide enough moisture, we suggest you apply Pre-Seed inside the vagina (as shown) while lying down in bed, IMMEDIATELY before intercourse. You may also want to squeeze a small amount of Pre-Seed from the tube onto your fingertips, and apply directly to external genitalia. If this application method provides too much moisture for you, apply the product earlier before intercourse (e.g., up to an hour), or apply fewer grams of product. Also, be sure to bear down to expel extra Pre-Seed after application, and wipe off excess product from the vulva area

## Pre-Seed®

### Vaginal-Gleitmittel für Paare mit Kinderwunsch.

- **Fördert die Spermienaktivität**
- **Gibt den Spermien eine optimale Umgebung**
- **Bestimmt die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich zu anderen Gleitmitteln**
- **Ausgewogener pH-Wert**

- **Anleitung für die Anwendung von Pre-Seed® mit Einmal-Applicatoren:**

the product. If symptoms persist contact your physician.

- Keep out of reach of children.
- **Do not use product if active infection or vaginal trauma is present.** If you have had recent surgery please seek medical advice before using.

**Directions for Using Pre-Seed® Externally:** Squeeze a small amount of Pre-Seed® (size of a quarter or teaspoon) onto your fingertips and apply to genital area. Vary amount to achieve desired lubrication. Pre-Seed's mild ingredients require you to apply a bit more Pre-Seed initially than you might with other products, in order to saturate the skin and provide longer lasting lubrication.

**Ingredients:** Purified Water, Hydroxyethylcellulose, Pluronic, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Carbomer, Methylparaben, Sodium Hydroxide, Arabinogalactan, Potassium Phosphate, Propylparaben

## deutsch


# Pre-Seed®

### Vaginal-Gleitmittel für Paare mit Kinderwunsch.

- **Fördert die Spermienaktivität**
- **Gibt den Spermien eine optimale Umgebung**
- **Bestimmt die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich zu anderen Gleitmitteln**
- **Ausgewogener pH-Wert**

- **Anleitung für die Anwendung von Pre-Seed® mit Einmal-Applicatoren:**

1. Entfernen Sie vor der ersten Anwendung die Versiegelung von der Tube.
2. Pre-Seed® soll bis zu 15 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr angewendet werden. Wenn Sie Pre-Seed® anwenden, bevor Sie anfangen Sex zu haben, kann sich die Feuchtigkeit überall in der Scheide verteilen. Dies ermöglicht Ihnen als Paar mehr Spontanität.
3. Setzen Sie den Applikator auf die Pre-Seed® Tube auf, indem Sie das Ende des Applikators fest auf die Tube aufdrücken (siehe Abbildung).

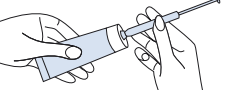

4. Drücken Sie Pre-Seed® vorsichtig in den Applikator. Drücken Sie so lange, bis sich die gewünschte Menge im Applikator befindet oder der Applikator voll ist. Für die Bedürfnisse der meisten Frauen ist die 3 g-Füllungsline ausreichend. Nehmen Sie den Applikator von der Tube ab. Vergewissern Sie sich, dass das offene Ende des Applikators nach oben gerichtet ist, damit kein Pre-Seed® verloren geht. Setzen Sie nach jeder Anwendung die Schutzkappe wieder auf und rollen Sie die Tube vom Ende her auf. Lassen Sie Pre-Seed® zwischen den Anwendungen nicht unverschlossen.
5. Bewahren Sie Pre-Seed® vor der Anwendung nicht länger als 30 Minuten im Applikator auf. Das heißt, wenn Pre-Seed® nicht innerhalb von 30 Minuten nach dem Aufziehen in den Applikator in die Scheide eingeführt wird, muss das unverbrauchte Pre-Seed® verworfen und der Applikator entsorgt werden.
6. Zur Anwendung von Pre-Seed® den Applikator vorsichtig tief in die Scheide einführen. Dies kann im Stehen, Liegen oder Sitzen (wie z. B. auf der Toilette) geschehen.

7. Halten Sie den Applikator am Zylinder und drücken Sie gleichzeitig den Kolben vollständig hinein, damit das Gleitmittel in die Scheide abgegeben wird (siehe Abbildung).



8. Ziehen Sie beide Teile des Applikators aus der Scheide.
9. Pressen Sie leicht, nachdem Sie das Produkt eingebracht haben, um die richtige Menge an Feuchtigkeit für Ihren Körper zu erhalten\*. Dadurch tritt überschüssiges, vom Körper nicht benötigtes Pre-Seed® aus. Überschüssiges Pre-Seed®, das sich auf den äußeren Schamlippen befindet, kann ggf. leicht mit einem Papiertuch abgewischt werden.
10. Entsorgen Sie den Applikator nach der Anwendung. **APPLIKATOREN NICHT WIEDER VERWENDEN.**

\* Sollte mit dieser Anwendungsmethode keine ausreichende Feuchtigkeit erzielt werden, empfehlen wir das Einbringen von Pre-Seed in die Scheide (wie dargestellt) im Liegen **UNMITTELBAR** vor dem Geschlechtsverkehr. Darüber hinaus empfiehlt es sich, eine kleine Menge Pre-Seed aus der Tube mit den Fingerspitzen direkt auf den äußeren Geschlechtssteilen zu verteilen. Sollte diese Anwendungsmethode zuviel Feuchtigkeit bewirken, wenden Sie das Produkt früher (d. h. bis zu einer Stunde) vor dem Geschlechtsverkehr an oder wenden Sie eine kleinere Menge an. Vergessen Sie außerdem nicht, nach der Anwendung zu pressen, damit überschüssiges Pre-Seed austritt und wischen Sie es von den äußeren Schamlippen ab.

### WICHTIGE HINWEISE

- Pre-Seed ist KEIN Verhütungsmittel. Es bietet Spermien eine optimale Umgebung und fördert sie in ihrer Funktion.
- Pre-Seed ist extrem gleitfähig. Versehentlich verschüttetes Material deshalb sofort aufwischen – Rutschgefahr!
- Sollten bei der Anwendung von Pre-Seed Reizungen oder

Misempfindungen auftreten, das Produkt nicht weiter verwenden. Sollten diese Probleme anhalten, bitte den Arzt aufsuchen.

- Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei einer Infektion oder Verletzungen der Scheide sollte das Produkt nicht verwendet werden. Nach operativen Eingriffen bitte vor Verwendung Ihren Arzt befragen.

### Hinweise zur äußeren Anwendung von Pre-Seed®:

Geben Sie eine kleine Menge Pre-Seed® (etwa einen Teelöffel) auf Ihre Fingerspitzen und verteilen Sie diese im Bereich der Geschlechtsorgane. Verändern Sie die Menge, um die gewünschte Gleitfähigkeit zu erzielen. Wegen der milden Inhaltsstoffe von Pre-Seed müssen Sie anfangs etwas mehr Pre-Seed auftragen als dies u. U. bei anderen Produkten erforderlich wäre, um die Haut zu sättigen und eine länger anhaltende Gleitfähigkeit zu erreichen.

### Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Hydroxyethylcellulose, Pluronic, Natriumchlorid, Sodium Phosphate, Carbomer, Methylparaben, Sodium Hydroxyd, Arabinogalactan, Potassium Phosphate, Propylparaben

## nederlands

# Pre-Seed®

### Vaginaal glijmiddel voor paren met een kinderswens.

### Bescherm de activiteit van de zaadcellen

- **Pre-Seed® creëert een ideale omgeving voor het sperma**
- **Bevordert de beweeglijkheid van zaadcellen in vergelijking met andere glijmiddelen**

- **Klinisch getest en wereldwijd aanbevolen door artsen.**
- **pH- waarde (7,4) in balans met vruchtbaar cervixlijm**

### Instructies voor gebruik van Pre-Seed® met wegwerp-applicatoren:


1. Verwijder vóór het eerste gebruik de verzegeling van de tube door deze met de bovenzijde van de dop door te drukken.
2. Pre-Seed® kan tot 15 minuten voorafgaande aan het geslachtsverkeer worden ingebracht. Door Pre-Seed® in te brengen voordat u begint met het liefdesspel, kan de hele vagina gelijkmatig worden bevochtigd zodat u als koppel net zo spontaan kunt zijn als altijd.
3. Bevestig de applicator op de Pre-Seed® tube door het uiteinde van de applicator stevig op de tube te draaien (zie afbeelding).



4. Druk het Pre-Seed® glijmiddel voorzichtig in de applicator en blijf op de tube drukken tot de applicator vol is of de gewenste hoeveelheid zich in de applicator bevindt. De meeste vrouwen kiezen de vulmarkering van 3 g, aangezien dit voldoende is voor de noodzakelijke bevochtiging. Haal de applicator van de tube. Zorg ervoor dat u het open uiteinde van de applicator rechtop houdt, zodat geen product verloren gaat. Breng na elk gebruik de dop weer op de tube aan en rol de tube vanaf de onderkant op. Laat tussentijds de tube Pre-Seed® niet liggen zonder dop.
5. Bewaar Pre-Seed® niet langer dan 30 minuten voor gebruik in de applicator. Dit wil zeggen, als u Pre-Seed® in de applicator gebruikt maar niet binnen 30 minuten in de vagina inbrengt, dan moeten de ongebruikte

Pre-Seed® en ook de applicator worden weggegooid.

6. Voor het inbrengen van Pre-Seed® brengt u de applicator voorzichtig diep in de vagina naar binnen. Dit kan naar eigen voorkeur staand, liggend of zittend (bijvoorbeeld op het toilet) gebeuren.
7. Terwijl u de cilinder van de applicator vasthoudt, drukt u langzaam de zuiger helemaal in om het glijmiddel in de vagina te laten vrijkomen (zie afbeelding).

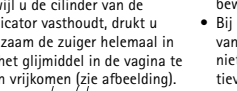

8. Verwijder beide delen van de applicator uit de vagina.
9. Om eventueel overblijve Pre-Seed® uit uw lichaam\* te verwijderen, buigt u zich na het inbrengen van het product iets naar voren. Indien gewenst kunt u met een papieren zakdoekje overmatig product wegvegen dat zich op de schaamlippen bevindt.
10. Gooi de applicator na gebruik weg. **GEBRUIK DE APPLICATOR NIET OPNIEUW.**

\* Als deze inbrengmethode niet zorgt voor voldoende bevochtiging, raden wij aan om Pre-Seed DIRECT voor het geslachtsverkeer liggend in bed (zoals afgebeeld) in de vagina in te brengen. Misschien wilt u ook een beetje Pre-Seed uit de tube op uw vingertoppen aanbrengen en dit direct op de buitenste geslachtsorganen aanbrengen. Als deze inbrengmethode bij u voor teveel bevochtiging zorgt, breng het product dan veel vroeger voor het geslachtsverkeer in (bijv. tot max. 1 uur van tevoren) of breng minder product in. Zorg er ook voor dat u overmatig product van de schaamlippen te vegeen.

**Ingrediënten:** Gezuiverd water, Hydroxyethylcellulose, Pluronic, Natriumchloride, Natriumfosfaat, Carbomere, Methylparaben, Natriumhydroxide, Arabinogalactan, Kaliumfosfaat, Propylparaben.

## suomi

# Pre-Seed®

### Vaginaalinen liukuvoide raskautta toivovalle parille.


### Liukuvoide suojaa siittiötä ja helpottaa niiden liikkumista.

- **Luo siittiöille optimaalisen ympäristön**

- **Edistä siittiöiden liikkuvuutta muihin liukuvoiteisiin verrattuna**
- **Kliinisesti tutkittu ja lääkärinen suosittelema**
- **Neutraali pH-arvo**

### Pre-Seed®-voiteen käyttö kertakäyttöasettimen kanssa:

1. Poista putkilon sinetti ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Pre-Seed®-voidetta voidaan käyttää jopa 15 minuuttia ennen yhdyntää. Kun voidetta käytetään ennen rakastelua, se kosteuttaa koko emättimen ja mahdollistaa spontaanin kanssakäymisen kumppaneiden kesken.
3. Kiinnitä asetin Pre-Seed®-putkiloon kiertämällä asettimen päätä tukevasti putkiloon (katso kuva).

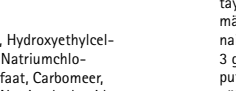


4. Purista Pre-Seed®-voidetta varovasti asettimeen ja jatka puristamista, kunnes asetin on täynnä tai siinä on haluamasi määrä voidetta. Useimmille naisille riittää asettimen täyttö 3 g:n rajan asti. Irrota asetin putkiloista. Pidä asettimen avoin pää ylhäällä, jotta voidetta ei valkaannut. Sulje korkki ja kierrä putkilon loppuosa rullalle jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä säilytä Pre-Seed®-voidetta ilman korkkia.
5. Älä säilytä Pre-Seed®-voidetta asettimessa 30 minuuttia kauempaa ennen käyttöä. Jos siirät Pre-Seed®-voidetta asettimeen mutta et vie sitä emättimeen 30 minuutin kuluessa, käyttämätön Pre-Seed®-voide ja asetin pitää hävittää.
6. Kun haluat käyttää Pre-Seed®-voidetta, vie asetin varovasti syvälle emättimeen. Voit tehdä tämän jälkeen keskustele lääkärisi kanssa ennen tuotteen käyttöä.
7. Pidä kiinni asettimen säiliöstä ja

- **Als zich bij het gebruik van Pre-Seed irritaties of een onaangenaam gevoel mochten voordoen, het product niet verder gebruiken.** Mochten deze problemen voortduren, s.v.p.uw arts consulteren.
- **Buiten bereik van kinderen bewaren.**
- **Bij een infectie of verwondingen van de vagina mag het product niet worden gebruikt.** Na operatieve ingrepen voor gebruik uw arts consulteren.



8. Poista asettimen kumpikin osa emättimestä.
9. Jotta kehosi saa sopivasti kosteutta\*, ponnista kevyesti voiteen annostelun jälkeen. Tällöin ylimääräinen Pre-Seed®-voide poistuu kehosta. Pyyhi tarvittaessa ylimääräinen voide kevyesti pois ulkoisista sukupuolielimistä paperilla.
3. Kiinnitä asetin Pre-Seed®-putkiloon kiertämällä asettimen päätä tukevasti putkiloon (katso kuva).

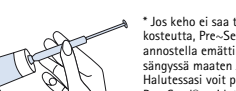

4. Purista Pre-Seed®-voidetta varovasti asettimeen ja jatka puristamista, kunnes asetin on täynnä tai siinä on haluamasi määrä voidetta. Useimmille naisille riittää asettimen täyttö 3 g:n rajan asti. Irrota asetin putkiloista. Pidä asettimen avoin pää ylhäällä, jotta voidetta ei valkaannut. Sulje korkki ja kierrä putkilon loppuosa rullalle jokaisen käyttökerran jälkeen. Älä säilytä Pre-Seed®-voidetta ilman korkkia.

\* Jos keho ei saa tällä tavalla riittävästi kosteutta, Pre-Seed®-voide kannattaa annostella emättimeen (kuvan mukaisesti) sängyssä maaten JUURI ennen yhdyntää. Halutessasi voit puristaa pienen määrän Pre-Seed®-voidetta putkiloista sormenpäihin ja levittää sen suoraan ulkoisiin sukupuolielimiin. Jos keho saa tällä tavalla liikaa kosteutta, annostele voidetta aiemmin (esim. tunti) ennen yhdyntää tai käytä voidetta vähemmän. Muista myös poistaa ylimääräinen Pre-Seed®-voide annostelun jälkeen ponnistamalla kevyesti ja pyyhkiä liika voide pois ulkoisista sukupuolielimistä.

### Tärkeitä huomautuksia

- Pre-Seed El ole ehkäisyvalmiste. Se luo siittiöille optimaalisen ympäristön ja edistää niiden liikkumista.
- Pre-Seed on erittäin liukuva. Pyyhi vahingossa läikkyneet materiaalit sen vuoksi heti pois – liukastumisvaara!
- Jos Pre-Seed-liukuvoiteen käytön yhteydessä esiintyy ärsytystä tai epämiellyttäviä tunteita, älä käytä tuotetta enää. Jos nämä ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
- Säilytä poissa lasten ulottuvilta.
- Tuotetta ei saa käyttää, jos emättimessä on tulehdus tai vammoja. Kirurgisten toimenpiteiden jälkeen keskustele lääkärisi kanssa ennen tuotteen käyttöä.

## Pre-Seed®-voiteen ulkoinen käyttö:

Purista pieni määrä Pre-Seed®-voidetta (neljäsosa teelusikallista) sormenpäihin ja levitä voide sukupuolielimiin. Muuta määrää tarpeen mukaan. Hellävaraisen ämöösin vuoksi Pre-Seed®-voidetta pitää käyttää aluksi hiukan enemmän kuin muita samantyyppisiä voiteita. Tällöin iho saa tarvitsessa määrällin kosteutta ja voiteen vaikutus kestää pidempään.

**Valmistusaineet:** Purified Water, Hydroxyethylcellulose, Pluronic, Sodium Chloride, Sodium Phosphate, Carbomer, Methylparaben, Sodium Hydroxide, Arabinogalactan, Potassium Phosphate and Propylparaben

## français


# Pre-Seed®

### Lubrifiant vaginal pour couples en désir d'enfants. Favorise la fertilité.

### Mode d'emploi de Pre-Seed® avec applicateur jetable :

1. Enlever l'opercule du tube avant la première utilisation.
2. Pre-Seed® peut être appliqué jusqu'à 15 minutes avant le rapport. Son application avant le rapport sexuel permet à l'humidité de se répandre partout dans le vagin, apportant ainsi plus de spontanéité au couple.
3. Fixer l'applicateur au tube Pre-Seed® en faisant pivoter l'extrémité de l'applicateur fermement sur le tube (voir image).

4. Presser doucement Pre-Seed® dans l'applicateur et continuer jusqu'à ce que l'applicateur soit plein ou jusqu'à obtention de la quantité souhaitée dans l'applicateur. La plupart des femmes choisissent la ligne de remplissage à 3 g pour répondre à leurs besoins en produit. Séparer l'applicateur du tube. S'assurer de maintenir l'extrémité ouverte de l'applicateur à la verticale pour ne pas perdre de produit. Remplacer le bouchon et refermer le tube en le tenant par le bas après chaque utilisation. Toujours reboucher Pre-Seed® entre les utilisations.
5. Ne pas garder Pre-Seed® dans l'applicateur plus de 30 minutes avant l'utilisation. Cela signifie que si vous insérez Pre-Seed® dans l'applicateur mais que vous ne l'introduisez pas dans le vagin dans les 30 minutes, il faudra jeter la quantité de Pre-Seed® non utilisée ainsi que l'applicateur.
6. our appliquer Pre-Seed®, introduire doucement l'applicateur au fond du vagin. Ce qui peut être effectué debout, couché ou assis (sur les toilettes par ex.).
7. Tout en tenant le corps de l'applicateur, pousser doucement le piston en entier afin d'injecter le lubrifiant dans le vagin (voir image).

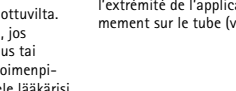

## italiano

# Pre-Seed®

### Lubrificante vaginale ideale quando si desidera il concepimento


### Favorisce la fertilità in quanto crea l'ambiente ideale per gli spermatozoi.

### Testato clinicamente

### Istruzioni per l'uso di Pre-Seed® con applicatori monouso:

1. Rimuovere il sigillo dal tubo prima del primo utilizzo.
2. Pre-Seed® può essere applicato entro i 15 minuti precedenti il rapporto sessuale. L'applicazione prima del rapporto sessuale consente una distribuzione uniforme del prodotto all'interno della vagina e una maggiore spontaneità alla coppia.
3. Attaccare l'applicatore al tubo di Pre-Seed® premendo e avvitando fermamente l'estremità dell'applicatore al tubo (vedere figura).

**Mode d'emploi de Pre-Seed® externe :** Presser pour faire sortir une petite quantité de Pre-Seed® (une cuillère à thé) sur le bout des doigts et appliquer sur les parties génitales. Modifier la quantité pour obtenir le degré de lubrification souhaité. Les ingrédients doux de Pre-Seed nécessitent d'en appliquer un peu

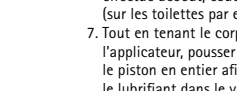

4. Spremere delicatamente il tubo di Pre-Seed® nell'applicatore fino a


vosre corps n'a pas besoin. Si cela est souhaitable, utiliser un tissu ou du papier pour enlever légèrement tout excédent de produit se trouvant sur la vulve.

10. Jeter l'applicateur après utilisation. NE PAS RÉUTILISER LES APPLICATEURS.

\* Si la méthode d'application n'apporte pas suffisamment d'humidité, nous suggérons d'appliquer Pre-Seed dans le vagin (comme montré) en étant allongé sur le lit, IMMÉDIATEMENT avant le rapport. Il est également possible de presser le tube pour sortir une petite quantité de Pre-Seed sur le bout des doigts pour l'appliquer directement sur les organes génitaux externes. Si cette méthode d'application apporte trop d'humidité, appliquer le produit bien avant le rapport (par ex. jusqu'à une heure avant) ou appliquer quelques grammes du produit. N'oubliez pas de pousser pour expulser le surplus de Pre-Seed après l'application et enlever le produit excédent de la zone de la vulve

### Notes importantes

- Pre-Seed n'est PAS un moyen de contraception. Il procure au sperme un environnement optimal et facilite sa circulation.
- Pre-Seed est très glissant. Essayez immédiatement tout produit renversé inopinément – Risque de chute!
- Si des irritations surviennent à la suite de l'utilisation de Pre-Seed, veuillez arrêter son utilisation. Si ces problèmes persistent, veuillez consulter un médecin.
- Garder hors de portée des enfants.
- En présence d'infection ou de blessures au niveau du vagin, ne pas utiliser Pre Seed. Consulter un médecin avant toute utilisation après des interventions chirurgicales.

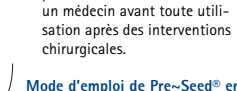

plus au début, contrairement à d'autres produits, afin de saturer la peau et d'apporter une lubrification plus longue.

### Composants:

Eau purifiée, Hydroxyéthylcellulose, Pluronic 127 pour ajuster la viscosité (propriété glissante), chlorure de sodium, sodium de phosphate, Carbomer, méthylparabène, hydroxyde de sodium, arabinogalactane (polysaccharide végétal), phosphate de potassium, Propylparabène

### Avvertenze importanti

- Pre-Seed NON è un metodo contraccettivo. Pre-Seed non uccide gli spermatozoi e non ne impedisce la funzione.
- Pre-Seed è dotato di un potere lubrificante eccezionale. Per questo, il prodotto versato accidentalmente va subito asportato, per prevenire cadute da scioglimento.
- Interrompere l'applicazione di Pre-Seed, se in seguito all'uso del prodotto compaiono irritazioni o fastidi. Se i disturbi persistono, consultare il medico.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non va utilizzato in presenza di infezioni o lesioni della vagina. Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto dopo interventi chirurgici.

**Modo de uso de Pre-Seed® con aplicadores desechables:**

1. Quite el precinto del tubo antes de usar el producto por primera vez.
2. Pre-Seed® puede aplicarse hasta 15 minutos antes del coito. La administración previa a las relaciones sexuales permite la distribución óptima de la humedad en la vagina y aumenta la espontaneidad en la pareja.
3. Monte el aplicador en el tubo Pre-Seed®; para ello, enrosque firmemente el extremo del aplicador en el tubo (véase la imagen).
4. Inyecte cuidadosamente Pre-Seed® en el interior del aplicador y siga apretando el tubo hasta que el aplicador esté lleno o hasta que contenga la cantidad de producto deseada. Para la mayoría de las mujeres es suficiente

quando esso sia più o contenga la quantità di prodotto desiderata, nella maggior parte dei casi pari a 3 g. Separare l'applicatore dal tubo. Assicurarsi di tenere l'estremità aperta dell'applicatore rivolta verso l'alto in modo da non disperdere inutilmente il prodotto. Dopo ogni utilizzo chiudere il tubo con il cappuccio e arrotolare il tubo dall'estremità inferiore. Non lasciare Pre-Seed® aperto fra le applicazioni.

5. Non lasciare il prodotto nell'applicatore per più di 30 minuti prima dell'applicazione. Pertanto, se riempite l'applicatore di Pre-Seed® ma non lo inserite all'interno della vagina entro i successivi 30 minuti, il Pre-Seed® inutilizzato va gettato insieme all'applicatore.

6. Per l'applicazione di Pre-Seed®, introdurre delicatamente l'applicatore in profondità nella vagina. Questa operazione può essere svolta in piedi, in posizione sdraiata o da sedute (come alla toilette).
7. Tenendo l'impugnatura dell'applicatore, spingerlo il più possibile in profondità per rilasciare il lubrificante in vagina (vedere figura).



### Modo de uso de Pre-Seed® con aplicadores desechables:

1. Quite el precinto del tubo antes de usar el producto por primera vez.
2. Pre-Seed® puede aplicarse hasta 15 minutos antes del coito. La administración previa a las relaciones sexuales permite la distribución óptima de la humedad en la vagina y aumenta la espontaneidad en la pareja.
3. Monte el aplicador en el tubo Pre-Seed®; para ello, enrosque firmemente el extremo del aplicador en el tubo (véase la imagen).
4. Inyecte cuidadosamente Pre-Seed® en el interior del aplicador y siga apretando el tubo hasta que el aplicador esté lleno o hasta que contenga la cantidad de producto deseada. Para la mayoría de las mujeres es suficiente

pluronic, cloruro di sodio, fosfato di sodio, Carbomer, Metilparaben, idrossido di sodio, arabinogalattano, fosfato di potassio, Propilparaben

## español

# Pre-Seed®


### Lubrificante vaginal para parejas que desean tener un bebé.

### Modo de uso de Pre-Seed® con aplicadores desechables:

- **Le da a los espermatozoides un entorno adecuado**
- **Fomenta la movilidad de los espermatozoides, en comparación con otros lubricantes**
- **Probado clínicamente y recomendado por médicos**
- **Optimiza el valor PH del moco cervical**

### Modo de uso de Pre-Seed® con aplicadores desechables:

1. Quite el precinto del tubo antes de usar el producto por primera vez.
2. Pre-Seed® puede aplicarse hasta 15 minutos antes del coito. La administración previa a las relaciones sexuales permite la distribución óptima de la humedad en la vagina y aumenta la espontaneidad en la pareja.
3. Monte el aplicador en el tubo Pre-Seed®; para ello, enrosque firmemente el extremo del aplicador en el tubo (véase la imagen).
4. Inyecte cuidadosamente Pre-Seed® en el interior del aplicador y siga apretando el tubo hasta que el aplicador esté lleno o hasta que contenga la cantidad de producto deseada. Para la mayoría de las mujeres es suficiente

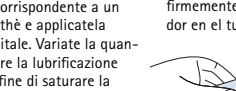

**Composizione:** acqua purificata, Idrossietilcellulosa,